


## návod k použití

# Masážní přístroj s vyhříváním pro komplexní masáž nohou

typ: MGF-839A

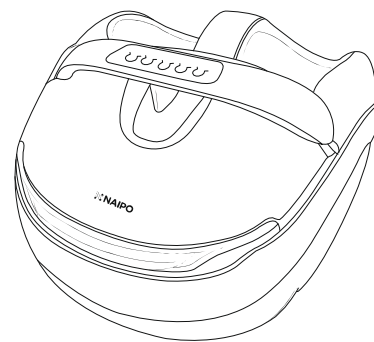

## Úvod

Děkujeme, že jste se rozhodli pro masážní přístroj s vyhříváním pro válečkovou masáž nohou firmy Naipo. Přečtěte si pozorně tento návod k použití a uschovejte si jej, abyste se k němu v případě potřeby mohli vrátit. Budete-li potřebovat jakoukoliv pomoc, obraťte se na naše oddělení podpory zákazníků. Při položení dotazu je nezbytné uvést modelové označení přístroje a číslo objednávky.

## Balení obsahuje

- 1 x masážní přístroj nohou
- 1 x návod k použití
- 1 x síťový adaptér

## Technické údaje

Název: masážní přístroj s vyhříváním pro komplexní masáž nohou

Model: MGF-839A

Napájení: 100 V – 240 V 50 Hz/60 Hz

Spotřeba energie: 65 W


Časovač: 15 minut

## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY


- Vyhněte se přímému kontaktu pokožky s přístrojem.
- Přístroj je vybaven vyhřívacím zařízením, proto dbejte opatrnosti, pokud je jeho uživatel citlivý na teplo.
- Přístroj nepoužívejte v prostředí s vysokou koncentrací benzínu, ředidel, alkoholu či žravin, jako jsou bělidla, aby nedošlo ke změně barevnosti výrobku, k jeho deformaci, popraskání a závadě.
- Nesedějte na přístroj a nepokládejte na něj těžké předměty.
- Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření.
- Uvedené osoby by přístroj používat neměly: těhotné ženy; lidé trpící srdečními chorobami či jinými zdravotními potížemi.
- Doporučujeme přístroj nepoužívat nepřetržitě déle než 15 minut. Nadměrné používání přístroje může způsobit bolest svalů či nervů.
- Děti by neměly přístroj používat bez dozoru dospělé osoby.
- Před použitím přístroje nebo během jeho používání neaplikujte léčivé/kosmetické krémy či emulze na tělo přístroje nebo na chodidla.
- Nepoužívejte přístroj, má-li poškozená nožní pouzdra nebo napájecí kabel.
- Pokud se do přístroje dostane voda, nepoužívejte jej.
- Přestaňte přístroj používat, pokud pocítíte bolest či diskomfort.

## Schéma přístroje

1. Zdrhovadlo
2. Ovládací panel
3. Spodní skořepina
4. Odnímatelná pouzdra na nohy (po rozeptnutí můžete pouzdra oddělit / suchým zipem a zdrhovadlem je můžete připevnit)
5. Horní skořepina

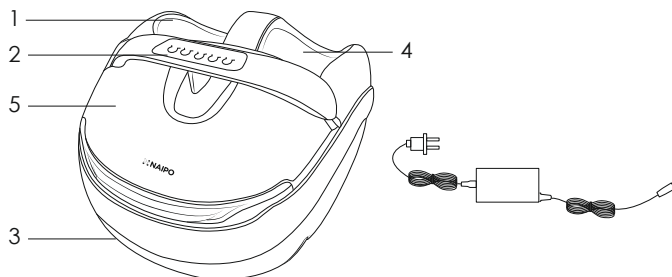

## Ovládací panel

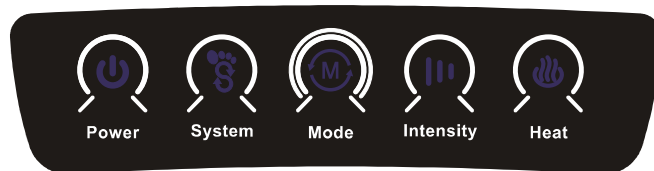

**Power (vypínač):** Když je přístroj v pohotovostním režimu, červená kontrolka bliká. Stiskem tlačítka přístroj zapnete, přičemž se zapne automatický masážní program, funkce vyhřívání a poklepová masáž (zelená kontrolka). Dalším stiskem tohoto tlačítka všechny funkce zastavíte.

**System (systém):** Když přístroj pracuje, přepínáte stiskem tohoto tlačítka mezi třemi automatickými masážními programy (změnu programu doprovází změna barvy kontrolky – zelená, modrá a červená).

**Mode (režim):** Stiskem tohoto tlačítka během činnosti automatického masážního programu ovládáte poklepovou masáž, válečkovou masáž a masáž stlačeným vzduchem. Po zapnutí přístroje se zapíná poklepová masáž, masáž stlačeným vzduchem a válečková masáž (zelená kontrolka). Stiskem tlačítka zastavíte poklepovou masáž, ale v činnosti zůstanou masáž stlačeným vzduchem a válečková masáž (modrá kontrolka). Dalším stiskem tlačítka zastavíte válečkovou masáž, ale v činnosti budou masáž stlačeným vzduchem a poklepová masáž (červená kontrolka). Při třetím stisku tlačítka zastavíte válečkovou a poklepovou masáž; v činnosti zůstane pouze masáž stlačeným vzduchem (kontrolka zhasnutá).

**Intensity (intenzita):** Stiskem tlačítka upravujete tři úrovně intenzity (nízká: zelená / střední: modrá / vysoká: červená). Po zapnutí přístroje probíhá masáž v režimu nízké intenzity.

Poznámka: Podržíte-li tlačítko „Mode“ delší dobu, zapnete pouze samostatnou poklepovou masáž. Stiskem tlačítka „Intensity“ nastavujete jednu ze tří úrovní rychlosti poklepové masáže. Stiskem tlačítka „Mode“ vyberete jeden ze tří režimů poklepové masáže.

Není-li poklepová masáž zvolena samostatně, upravuje stisk tlačítka „Intensity“ tři úrovně masáže stlačeným vzduchem.

## Údržba výrobku

- Před čištěním výrobek odpojte od elektrické sítě.
- Čistěte pouze měkkou a mírně vlhkou houbou.
- Nečistěte agresivními čisticími prostředky (jako jsou benzen a ředidla).

## Řešení problémů

Problém	Řešení
Přístroj nepracuje, přestože byl připojen ke zdroji elektrického proudu.	Zkontrolujte, v jakém stavu je napájecí kabel, zda není poškozený.
	Zkontrolujte, zda je zástrčka správně zasunuta do zásuvky.
	Po delší době činnosti se mohou přístroj a jeho motor přehřát. Přístroj se poté z bezpečnostních důvodů automaticky vypne. Odpojte jej od elektřiny a vyčkejte 30–50 minut, než zchladne.
Výrobek během činnosti přestal pracovat.	Pokud došlo k zapnutí časovače a čas vypršel, nastartujte přístroj znovu.
	Odpojte přístroj od elektřiny, znovu jej zapojte a pak nastartujte.

## Záruka a služby zákazníkům

Potřebujete-li pomoci vyřešit problémy s používáním výrobku, využít další služby apod., spojte se s námi prostřednictvím webové stránky

<https://www.neoxgroup.cz/kontakty/>

Záruční lhůta 2 roky od data nákupu.

NEOX GROUP s. r. o., V Slavětíně 2632/23, Praha 9 - Horní Počernice 193 00, Česká republika

Vyrobeno v Číně



NEOX GROUP s.r.o. [www.neoxgroup.cz](http://www.neoxgroup.cz)